

Tyson


RF MICRO-NEEDLING



MODAN
מודן. מכשור טכנולוגי מתקדם

אחד מטיפולי העור היעילים ביותר RF MICRO-NEEDLING

הטיפול במחטים מקרוסקופיות (MNS), הוא באמצעות ראש המכיל מחטים מיקרוסקופיות סטריליות המונחות על מכשיר מחטים, מדובר על טיפול קוסמטי מהפכני לחידוש ושקום עור, טיפול המטפל בשכבת הדרמיס- השכבה השנייה והעמוקה יותר האחראית על ייצור הקולגן בעור. הטיפול נקרא גם טיפול כדי לעורר את ייצור הקולגן בעור. הטיפול למעשה מכריח את העור לייצר קולגן - חומר שאין לנו עודפים מימנו (בשונה משומן) ואחד מהמרכיבים החשובים של רקמות החיבור בגופנו ובעורנו. הוא נותן חוזק מבני לעור וחוסרו הוא הסיבה העיקרית לרפיון העור. הטכנולוגיה מייצרת גירוי ממוקד מחטים מיקרוסקופיות המחממות את רקמת העור במטרה לייצר אלסטין וקולגן באופן מבוקר ובטיחותי ולהצעיר את העור באופן משמעותי.

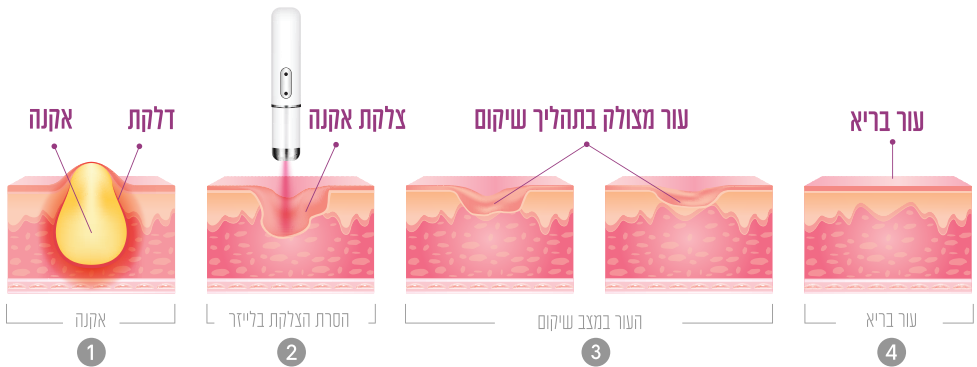

יתרונות הטיפול

ראשית, דקירת העור באופן זה מגרה את ייצור הקולגן, וכתוצאה מכך הטיפול יכול להועיל למעשה למגוון בעיות הגרממות כתוצאה ממחסור בקולגן זה מגביר את חיוניות העור וזוהרו. שנית, טכנולוגיית המיקרו-מחט משפרת מאוד את חדירתם של קרמים, ג'לים, שמנים חומצות, הילארונית ואמינו, פפטידים מינרלים ואנזימים ועוד.

ככל שהמוצרים נספגים בהצלחה רבה יותר - ביצועיהם משופרים, ותרואו תוצאות משופרות, וכתוצאה מכך עור בריא, חלק וזוהר יותר. התוצאה הרצויה הינה חידוש עור באופן משמעותי בתוך מספר טיפולים, באופן טבעי ונראה לעין במהירות כבר לאחר טיפול ראשון! כל זאת ללא כאב ובטיפול קצר יחסית 30-45 דקות כולל החדרת חומרים.

למי זה מתאים?


הטיפול מתאים לכל סוגי העור, אינו כואב וניתן להתחיל בו כבר בגילאים צעירים, כמובן שכל מקרה יבחן לגופו על ידי אשת מקצוע.

בנוסף טיפול זה מיועד לכל גווי העור, מקנה למטופליו זמן החלמה קצר, מחדש את העור פלאים. כל זאת ללא כאב ובטיפול קצר יחסית 30-45 דקות כולל החדרת חומרים.

באיזה איזורים ניתן לטפל באמצעות גלי רדיו?

מיצוק צוואר ודקולטה

מיצוק הצוואר על ידי עידוד ייצור קולגן בעור ובתת עור, שיפור מרקם עור הצוואר וכיווץ ומיצוק הקמטוטים בצוואר ובחזה.

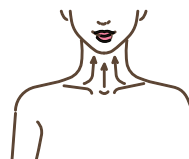

טיפול לאקנה פעיל

שימוש במייקרונידלינג RF עם או בלי לכשירים רפואיים יוביל לאיזון בלוטות החלב והפחתה משמעותית בחיידק ה P ACNES האחראי על פצעי אקנה דלקתיים.




צלקות אקנה


שימוש במייקרונידלינג RF יוביל לשיפור משמעותי בצלקות אקנה שקועות ויוביל לחידוש הקולגן בשכבת הבסיס והעור וריפוי רקמת הצלקת.



טיפול גוף

ניתן לטפל בגלי רדיו בעור רפוי וסימני מתיחה בבטן, ירכיים וחזה.

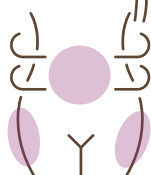

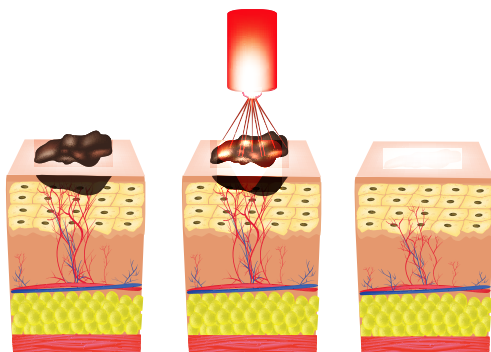

טיפול

- צלקות
- מתיחת פנים
- אקנה
- פוסט אקנה
- קמטים בצוואר
- סימני מתיחה אדומים ולבנים
- טיפול בעור רפוי
- הידוק העור

מה מיוחד בטיפול?

הטיפול החדשני על ידי גלי רדיו המועבר על ידי מיקרו מחטים - **Microneedling RF** - בשיטת טיפול זו מועברת האנרגיה לרקמת העור על ידי מחטים דקות מאוד בעובי של 150 מיקרון. בצורה זו חודרת האנרגיה ומחממת את העור בעומק ללא פגיעה בשטח העור. בשל כך הטיפול יעיל מאוד מצד אחד ואין לו שום תופעות לוואי מצד שני. הטיפול לא כואב!

חימום רחב של הדרמיס (שכבת העור השניה) גורם לייצור מחודש של קולגן ורקמת חיבור בעור וכך להתחדשות העור, הצערת עור, כיווץ הרקמה, הרמת העור, שיפור בקימטוטים, שיפור בצלקות אקנה ובאקנה, בסימני מתיחה, ריפיון ועוד. בעקבות הטיפול יש בדרך כלל אודם קל לכמה שעות שניתן לכסות עם מייק אפי. האודם יכול להימשך עד כ- 48 שעות. אין צורך להישאר בבית לאחר הטיפול. התוצאות של טיפולים אלו מעולות.

ניתן לראות שיפור ניכר בצלקות אקנה, בקמטוטים, בהרמת הרקמה ובסימני מתיחה. אין סיכונים ואין צורך להישאר בבית לאחר הטיפול. טיפול זה הינו אחד מהפופולריים ביותר בין המטופלים. ניתן לבצע טיפול זה גם באנשים עם עור כהה.

כמה טיפולים צטרך?

תכנית הטיפול היא בדרך כלל 3-6 מפגשים, בהתאם למטופל. הטיפולים ניתנים כל 4 שבועות לקבלת התוצאות הטובות ביותר. מרווח זמן זה נבחר מפני שהוא שומר על העור במצב "פעיל", ז"א נותן לעור לתקן את עצמו ואז נבצע את הטיפול הבא..


תהליך התאוששות העור

בהתאם לרמות הטיפול עומק חדירת המחטים ודרגת החום, תוכלו לחוות רמות משתנות של אדמומיות. צלקת אקנה דורשת יותר אנרגיה ולכן יגרמו אדמומיות. טיפולים קלים יותר עבור קמטים ומתיחת עור רפוי משמעותן פחות אדמומיות. בשני המקרים החזרה לשגרה מהירה!

Tyson

איך נעבוד עם
RF MICRO-NEEDLING

אזור פעולה	עומק	זמן	ספיגה	RF
מצח	0.5-1.0 מ"מ	0.2-0.3	1-2	60-110W
פנים	1.0-1.5 מ"מ	0.2-0.3	1-2	60-100W
עין	0.5-1.0 מ"מ	0.2-0.3	1-2	60-100W
סנטר	0.5-1.2 מ"מ	0.2-0.3	1-2	60-100W
אף	0.5-1.0 מ"מ	0.2-0.3	1-2	60-100W
צוואר	1.0-1.5 מ"מ	0.2-0.3	1-2	60-100W
בורות אבעבועות	1.0-2.0 מ"מ	0.2-0.3	1-2	60-100W
צלקות	1.0-2.0 מ"מ	0.2-0.3	1-2	60-120W
בטן	1.3-3.0 מ"מ	0.2-0.3	0-1	60-120W

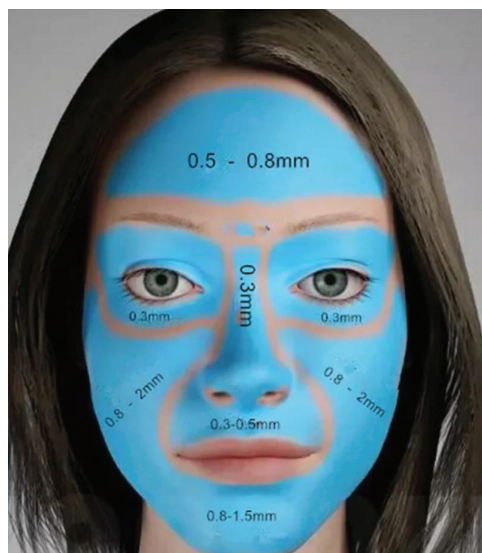



מחטים:

25 מחטים (מבודד)

אנרגיה ממוקדת וביצועים גבוהים יותר

תדר גבוה

זמן החלמה קצר

אנרגיה רק בקצה המחט

64 מחטים (לא מבודד)

זמן החלמה ארוך יותר

תדר גבוה יותר (סיכון לכיויים)

אנרגיה לאורך כל המחט

מפרט טכני:

רמת אינטנסיביות RF- 1-10

תדר 2MHz

אנרגיה 50w


עומק המחט 0.5-3.5mm

משך דופק 100-900ms

מסך מגע 10.4 אינץ' סט"י


שיקום העור באמצעות לייזר

לפני


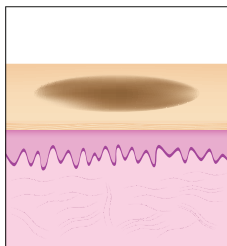


עור בעייתי

אחרי

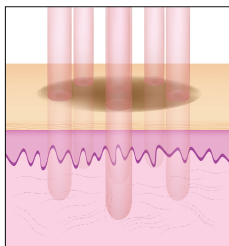

הסרת העור על ידי הלייזר

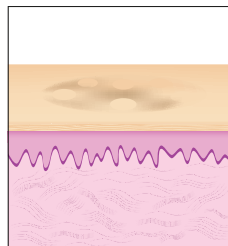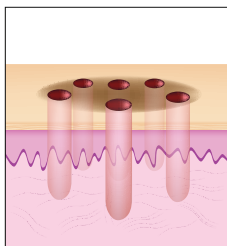

ריפוי



MOODAN
מודן. מכשור טכנולוגי מתקדם